




사용 설명서

- 사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 사용 설명서에 기재된 설치 방법 및 안전 주의사항을 반드시 지켜 주십시오.
- 본 사용 설명서의 내용을 지키지 않아 발생한 안전사고에 대해서는 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품의 외관 및 제품 규격 등은 제품의 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

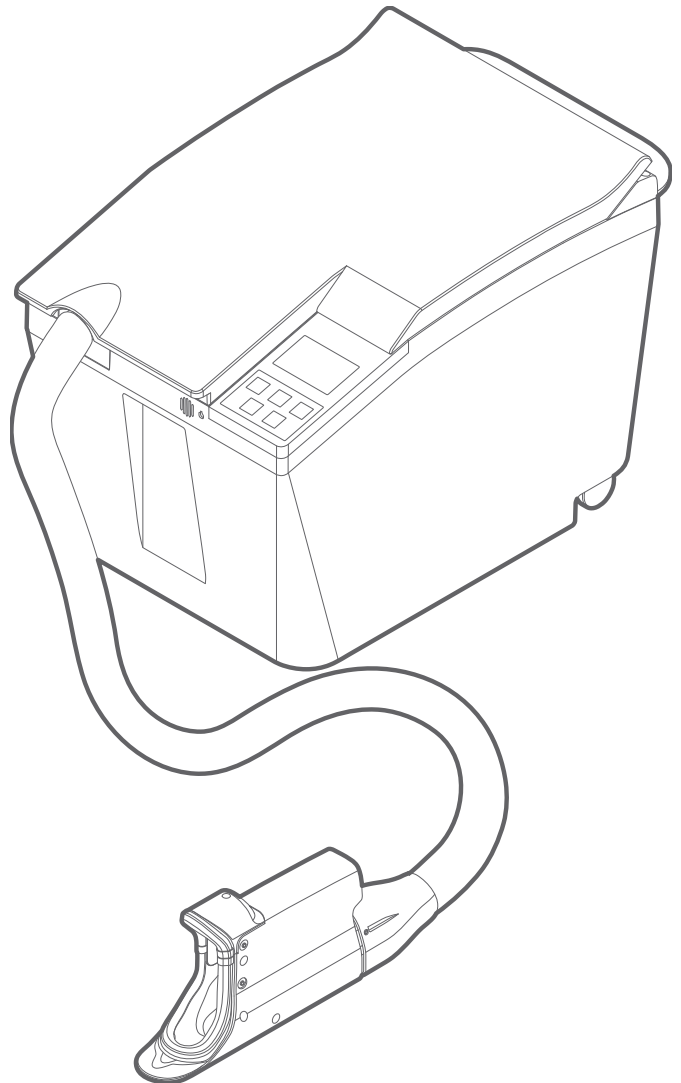

(주)큐라코 케어비데 1B 제품과 상기 문서에 대한 저작권을 포함한 지적 재산권은 (주)큐라코에 있으며, (주)큐라코가 명시적으로 허용하지 않은 사용, 복사, 제 3자에의 공개, 배포는 엄격히 금지됩니다.

목차

1	제품의 특징점	05
2	안전 주의사항	06
3	제품 설명	10
3-1	구성품 확인	10
3-2	각 부의 이름	12
4	설치 방법	15
4-1	본체 설치	15
4-2	기저귀커버와 기저귀컵 연결	19
5	착용 방법	22
5-1	기저귀컵 착용	23
5-2	착용 후 자세 조정	30
5-3	기저귀컵 탈거	35
6	작동 방법	38
6-1	조작반 구성과 명칭	38
6-2	조작반 사용	41
6-3	설정 변경	44
7	유지 보수	50
7-1	점검	50
7-2	관리 방법	52
7-3	소독	68
7-4	보관 방법 (장시간 미사용 시)	74
서비스 제공 안내		79
	서비스 요청 전 확인사항	79
	서비스 제공	81
제품 사양		83

1 제품의 특징점

케어비데 1B는 거동이 불편한 환자, 노약자, 장애인 및 침상 환자들의 대·소변 시 종이 기저귀를 사용하지 않고 세척에서 비데, 건조까지 자동으로 처리해 주는 간병 보조기기입니다.



자동으로
대·소변 인식



온풍 건조




음부 세정
항문 세정



탈취 필터로
냄새 제거



회전 노즐로 세정

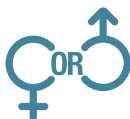

성별 맞춤 착용



30도 자세 변환 가능

2 안전 주의사항

제품의 올바른 사용과 사용자의 안전을 확보하고 재산상의 피해를 방지하기 위해 제품을 사용하기 전에 반드시 다음 안전 주의사항을 숙지하시기 바랍니다.

표시된 기호 설명



경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



참조

제품을 사용할 때 사용자가 알아 두면 좋을 유용한 사항들을 알려줍니다.



안전을 위한 경고사항

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

- 전원 플러그에 붙은 먼지나 물기 등을 제거하고 콘센트를 끝까지 확실하게 꽂으십시오.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 임의로 교환하지 마시고, 바로 구입처나 서비스 센터로 연락하여 제조사, 서비스 센터 또는 자격을 보유한 기술자를 통해 전원 코드를 교체 받으세요.
- 사용할 전기 콘센트가 접지선(어스선)에 3중 접지 처리가 되어 있는지 확인하십시오. 접지 처리가 되어 있지 않으면 고장이나 누전 시 감전의 원인이 되므로 전문 전기 기사에게 문의하십시오.
- 본 제품 후면 라벨에 명시되어 있는 전압과 사용 국가 내에서의 전압이 일치하는지 반드시 확인한 후 일치할 경우에만 사용하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 발열이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드를 무리하게 잡아 당기거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. 누전, 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 습기가 많은 장소에 설치하지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 임의로 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
- 제품 주변에 화기류(난방기기, 발열기기 등)를 함께 놓고 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 담배와 같은 가연성 물질을 제품에 던지지 마십시오.
- 제품 내부로 물기나 습기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
 - » 습기 또는 액체 성분은 제품의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
 - » 내부로 물이 들어간 경우 전원을 끄고 물기를 제거한 후 서비스 센터에 문의하십시오.
 - » 본체가 물에 젖거나 액체 등에 잠겨 발생한 고장에 대해서는 무상 수리를 받을 수 없으니 주의하십시오.
- 기저귀컵을 흐르는 물에 세척하거나 물에 절대 담그지 마십시오.



안전을 위한 주의사항

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

- 중수도나 공업용수의 수도를 사용하지 마십시오. 피부 질환이나 손상을 일으킬 우려가 있습니다.
- 세정수통 경고 메시지가 표시되면 세정수통에 깨끗한 물을 채워 주십시오. 마실 수 있는 물, 수돗물, 전해수¹⁾, 차아염소산수(미산성)²⁾ 등을 권장합니다.
- 증류수 또는 정수된 물을 사용하지 마십시오.
- 화상, 저온 화상에 주의하십시오. 피부가 40도 이하의 비교적 낮은 온도에서 피부가 같은 부위에 장시간 접촉되었을 경우 화상을 입을 수 있습니다.
- 온풍 건조를 8분 이상 사용할 경우 저온 화상의 위험이 있을 수 있으니 주의하십시오.
- 어린이, 노약자, 피부질환자, 피부가 약한 분, 스스로 온도 조절을 할 수 없는 분, 수면제, 감기약 등을 복용하신 분 등은 사용에 주의하시기 바랍니다.
- 제품 사용 전 질병이나 상처가 있는지 확인하고 몸에 이상이 있을 경우에는 사용 여부를 의사와 상담하여 판단하시기 바랍니다.
- 제품에 이상이 발생하거나 고장 시 즉시 사용을 중지하고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
 - » 본체나 기저귀컵 등 제품이 파손됐을 경우
 - » 이상한 소리가 나거나, 냄새가 나는 경우
 - » 전원 코드를 만지면 전원이 꺼지거나 켜지는 경우
 - » 전원 플러그나 전원 코드가 뜨거울 경우
 - » 본체나 기저귀컵이 뜨거울 경우
- 본체 위에 올라 가거나 무거운 것을 올려두지 마십시오. 파손으로 인한 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 본체 커버를 연 상태로 앉아서 기대거나 무리하게 여닫지 마십시오.

1) 전해수: 전기분해수라고 하며 피부를 보호하고 살균/소독을 하는 용도로 쓰임. 인체에 무해하며 세정수로 사용 가능

2) 차아염소산수(미산성): 병원에서 주로 사용하는 인체에 무해한 소독수로 친환경 식품첨가물로 활용

- 기저귀컵과 연결된 호스를無理하게 구부리거나 찌그러뜨리지 마십시오. 파손으로 인한 누수의 원인이 될 수 있습니다.
- 외관 청소 시 세제, 벤젠, 신나, 화학약품, 수세미 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 또는 금속 등을 손상시킬 위험이 있습니다.
- 어린이가 혼자 사용하거나 어린이의 손이 닿지 않게 하십시오.
- 유아나 장애인이 사용할 땐 보호자와 함께 사용하십시오.
- 탈취 필터, 세정수통, 오물통을 분리한 상태로 전원 플러그를 꽂지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우 세정수통을 비우고 전원 플러그를 뽑아 놓으십시오.
- 동결 예방을 위해 사용 장소는 항상 따뜻한 온도를 유지하십시오.
- 경사진 곳이나 굴곡진 곳에서는 제품 사용을 가급적 자제해 주십시오.
- 밀폐된 공간에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 오물통 경고 메시지가 표시되면 즉시 오물통을 비워 주십시오. 오물통이 가득 차면 기기가 작동하지 않으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 기저귀컵을 무리한 힘으로 착용하지 마십시오.



장시간 착용 시 반드시 2시간에 1회 이상의 자세 변환이 필요하며, 사용자의 상태에 따라 전문가와 상담하여 사용하시기 바랍니다.



제조원

주식회사 큐라코

경기도 성남시 중원구 사기막골로 52
(선택시티2, 307호) (13210)

www.curaco.co.kr

판매원

